

LED-A 型口腔灯

LED-A Dental Operating LED Light

使用说明书

Instruction for use



4、当灯处于熄灭状态时，手拨动扳柄开关，口腔灯被点亮，再拨动一下，口腔灯被关闭。当灯处于熄灭状态时，手迅速从感应开关下方掠过，口腔灯被点亮；手迅速从感应开关下方掠过，口腔灯被熄灭。（感应距离为 0-100mm）

4、When the light is off, slide the switch to turn the light on, and the lamp will be turned off if you slide the switch again. When the light is off, you can activate it by a quick sweep of the hand under the sensor switch; sweep again, you will turn the light off (the induction distance is 0-100mm).

七、保养与注意事项 / Maintenance & Attention

可用三用枪气体进行清洁，也可以用柔软棉质绒布或者湿纸巾清洁。

To clean the lamp, please use three-way syringe or something like soft cotton flannel or wet wipes.

注意灯的所有表面不可以用腐蚀性液体擦拭清洁。

Do not wipe or clean the surface of the lamp with corrosive liquids

佛山市华创医疗科技有限公司

Foshan Huachuang Medical Science And Technology Co.,Ltd

地址：佛山市南海区狮山镇罗村广东新光源产业基地 A3 栋 4 楼之二

Acdd: 4th Floor, Building A3, Guangdong New Light Source Industrial Base, Luo Village, Shishan Town, Nanhai District, Foshan City

网址 / Web: www.hcykj.com

邮箱 / E-mail: sales_dentalledlight@hcykj.com

安装使用前，请仔细阅读本说明书

Read the manual carefully before using the light

一、适用范围 / Scope

该产品主要在牙科诊所室内使用，用于患者口腔的照明。
The product is mainly used in dental clinics for illuminating the oral cavity of patients.

二、产品结构组成 / Structure of the light



四、工作环境 / Working Condition

工作环境 / Working Condition

使用环境温度 / Ambient Temperature	5-40°C
相对湿度 / Relative humidity	30-75%
大气压强 / Atmospheric pressure	70-106kpa


储存和运输环境 / Transportation And Storage Condition

运输温度 / Transportation Temperature	-40-70°C
相对湿度 / Relative Humidity	-10-+100%
大气压强 / Atmospheric Pressure	50-106kpa

五、技术参数 / Technical Data

输入电压 / Input voltage	AC12V-24V
功率 / Power	11W
照度 / Illumination	7000lx / 8000lux
色温 / Color Temperature	4800K-5500K
净重 / Net weight	1146g
毛重 / Gross weight	1700g

三、安装方法 / Installation method

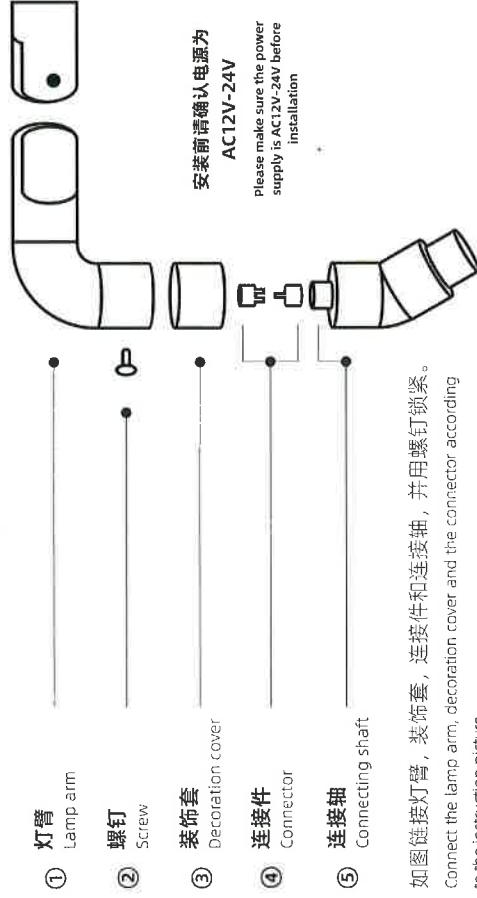

如图链接灯臂，装饰套，连接件和连接轴，并用螺钉锁紧。
Connect the lamp arm, decoration cover and the connector according to the instruction picture.

六、操作说明 / Operating Instructions

1、根据右边的图片松开螺丝，将距离和角度调整到自己习惯的位置后拧紧螺丝。

2、当灯处于熄灭状态下，手拨动扳柄开关，口腔灯被点亮，再拨动一下，口腔灯被关闭。

当灯处于熄灭状态下，手迅速从感应开关下方掠过，口腔灯被点亮；手迅速从感应开关下方掠过，口腔灯被关闭。（感应距离为 0-100mm）



1. Loosen the screw according to the picture on the right, adjust the distance and angle to your accustomed position and tighten the screw.

2. When the light is off, slide the switch to turn the light on, and the lamp will be turned off if you slide the switch again. When the light is off, you can activate it by a quick sweep of the hand under the sensor switch; sweep again, you will turn the light off (the induction distance is 0-100mm).